









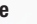
RF3000[®]

pipette controller

Un mundo de características para un pipeteado seguro y preciso

La poderosa bomba ofrece una rápida y sensible aspiración y dispensación, tiene válvulas ajustables y el micro procesador es controlado para una confiabilidad y precisión constantes.

- Funciona con 100 – 240 voltios, suministro eléctrico global
- Agarre universal y suave revestimiento con indicadores de uso, para diestros y zurdos.
- Balance manual ergonómico aún con una pipeta en su máxima capacidad.
- Indicadores de LED especifican tres modos de operación: alto, bajo y por gravedad
- Operación alternada al presionar el botón principal
- Los filtros tienen disponibilidad inmediata, usted no está comprometido a usar una marca específica de pipeta. Ayuda a reducir el total de costo posesión del producto, comparado con otros auxiliares de pipeteado
- Un adaptador puede ser insertado al cono para estabilizar pipetas delgadas y con reducida capacidad de volumen.

Número de parte	Descripción
HS3000	RF3000 con adaptador de energía
Partes Reemplazables	
HS5000RFFIL	Filtros, paquete de 5
HS300501	Adaptador universal de energía
HS300502	Batería** RF3000    
HS300504	Conos sujetadores, paquete de 5      Autoclaveable * Colores variados (Negro, Amarillo, Rojo, Gris y Azul) **Pila no incluida en la Garantía de Cinco Años

Especificaciones

Fuente de energía:	Baterías li- Ion recargables (reemplazable)
Filtro:	PTFE/25 mm día / filtro de 0.45 µm
Pipetas:	1 – 100 ml, vidrio y plástico
Boquilla de la pipeta:	Polipropileno, autoclaveable
Dimensiones:	15 x 152 x 41 mm

Un año de garantía

Probado para cumplir con los estándares de EMC, Estados Unidos, Canadá y Europa.

Batería recargable li-Ion (reemplazable)

Armazón resistente a rayos UV

Base para mesa de trabajo

